

HYD1 硬件接口定义说明

一、HYD1 光谱仪硬件接口

HYD1 光谱仪硬件接口是一个 12pin 的 FPC 软排线，如下图 1 所示。

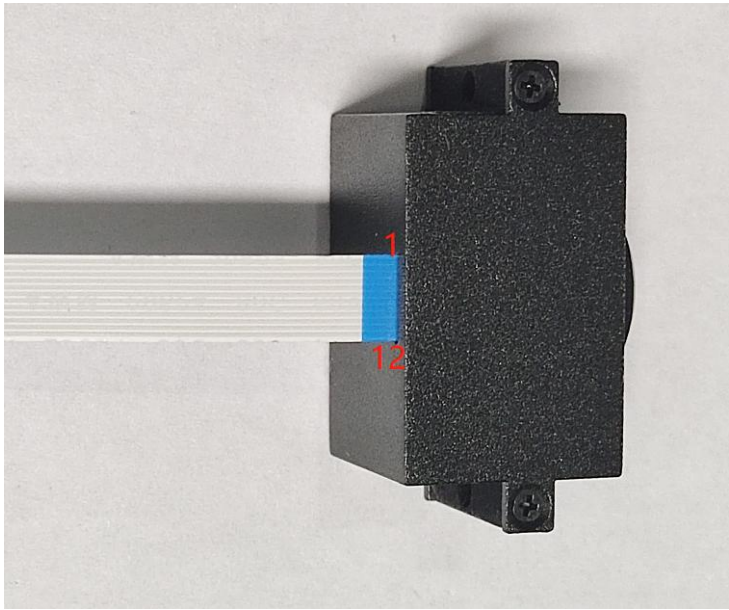


图 1 HYD1 FPC 软排线图

FPC 软排线 12pin 的具体定义，如下表所示，其中 TXD0、RXD0 是通信串口。

FPC 软排线 12pin 脚定义	
1	VCC_3.3V
2	NC
3	GND
4	NC
5	NC
6	GND
7	Trigger(上升沿触发)
8	TXD0(TTL)
9	RXD0(TTL)
10	VCC_3.3V
11	RESET
12	GND

二、开发板硬件接口

开发板上有多个硬件接口，如下图 2 所示。其中 SW1 是设备复位按钮，USB_UART 是 typeC 接口的串口 USB，客户可以直接通过该 USB 实现与设备之间串口通信，J2 是连接光谱仪的 FPC 软排线接口，J3 是 debug 接口，J4 是 UART0(TXD0、RXD0)的 TTL 接口。

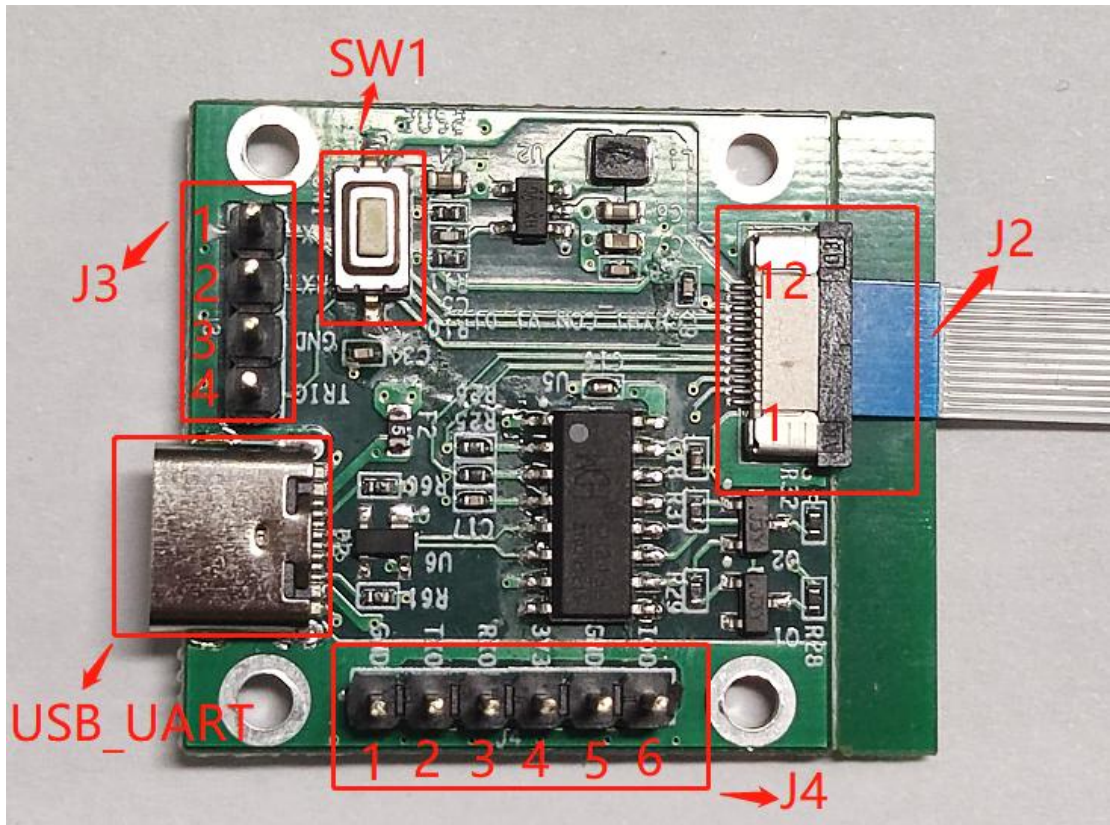


图 2 开发板硬件接口示意图

J2、J3、J4 的具体定义，如下表所示，其中 TXD0、RXD0 是通信串口。

J2 FPC 软排线 12pin 脚定义		J3 pin 脚定义		J4 pin 脚定义	
1	GND	1	TXD1(TTL)	1	GND
2	RESET	2	RXD1(TTL)	2	TXD0(TTL)
3	VCC_3.3V	3	GND	3	RXD0(TTL)
4	RXD0(TTL)	4	Trigger	4	VCC_3.3V
5	TXD0(TTL)			5	GND
6	Trigger			6	BOOT
7	GND				
8	NC				
9	NC				
10	GND				
11	NC				
12	VCC_3.3V				